


PRELEVEMENT DE PLACENTA

Réaliser en salle de travail :

- **2 frottis placentaires** – éliminer l'excès de sang de la face maternelle et fœtale du placenta avec une compresse stérile puis racler avec le bord d'une lame la face amniotique du placenta de l'insertion du cordon vers les membranes. Etaler le produit du raclage sur une seconde lame en une couche épaisse. Procéder de la même façon sur la face maternelle. Sécher les 2 frottis à l'air libre et les identifier. Transmettre dans un porte-lame ou en poudrier.
- **1 biopsie** d'environ 1 cm² portant sur toute l'épaisseur du placenta en plein centre des lésions si des abcès sont visibles ou près de l'insertion du cordon si le placenta est apparemment normal. Transmettre dans un poudrier stérile.

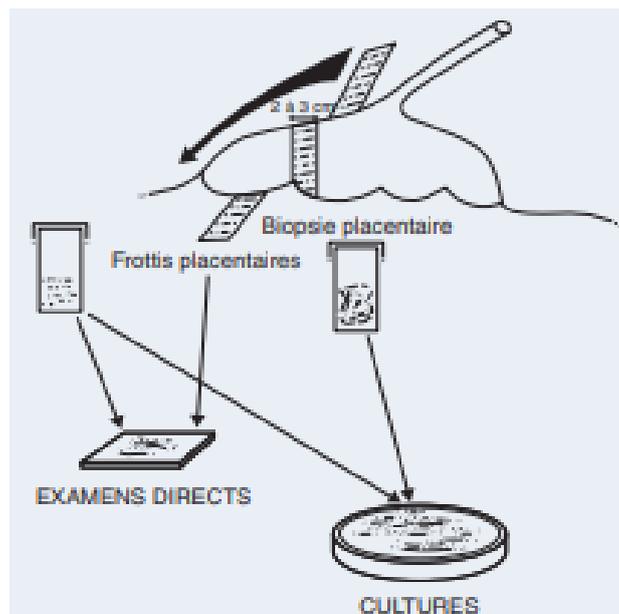

Bactériologie médicale – Techniques usuelles. F Denis et al - 2007