


HPV - PRELEVEMENT CERVICAL DANS LE CADRE DU DEPISTAGE DU CANCER DU COL UTERIN

Se désinfecter préalablement les mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique et mettre des gants à usage unique.

Installer la patiente en position gynécologique.

Mettre en place le speculum (sans utiliser de lubrifiant) puis introduire la brosse cervicale dans l'endocol comme indiqué sur l'image de droite.

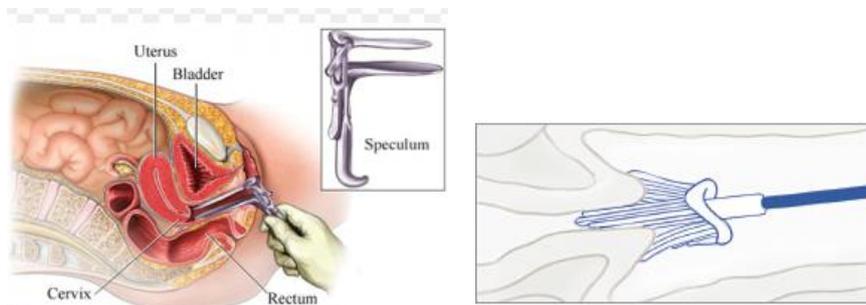

Faire tourner lentement **5 fois** la brosse dans le sens des aiguilles d'une montre en balayant la zone de jonction. Eviter les saignements.

Déboucher le flacon de recueil et y insérer la brosse de prélèvement dans la plus large ouverture (cf. image ci-dessous)



Tourner la tige du dispositif pour bloquer la brosse à l'intérieur du flacon puis tirer délicatement vers le haut pour détacher la brosse dans le flacon.

Refermer le flacon en vissant le bouchon et enlever le spéculum.

Identifier le flacon avec : nom – prénom – date de naissance de la patiente.

Ne pas oublier de compléter la fiche de transmission du prélèvement jointe au kit de prélèvement.

Insérer le flacon et la fiche de transmission dans un sachet double poche. Transmettre rapidement le prélèvement au laboratoire.