


PRELEVEMENT URETRAL

Un **déla** minimum de **1 heure** doit séparer le prélèvement de la dernière miction.

Se désinfecter préalablement les mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique et mettre des gants à usage unique.

Avant miction :

- Prélever *1 seul écouvillon Transwab fin* (bouchon **orange**) pour la recherche bactériologique standard :
 - si écoulement purulent prélever directement la goutte de pus,
 - sinon introduire l'écouvillon dans l'urètre en effectuant 3 à 4 rotations, afin de ramener le maximum de cellules.
 - décharger et casser l'écouvillon dans le milieu de transport selon le schéma ci-dessous.

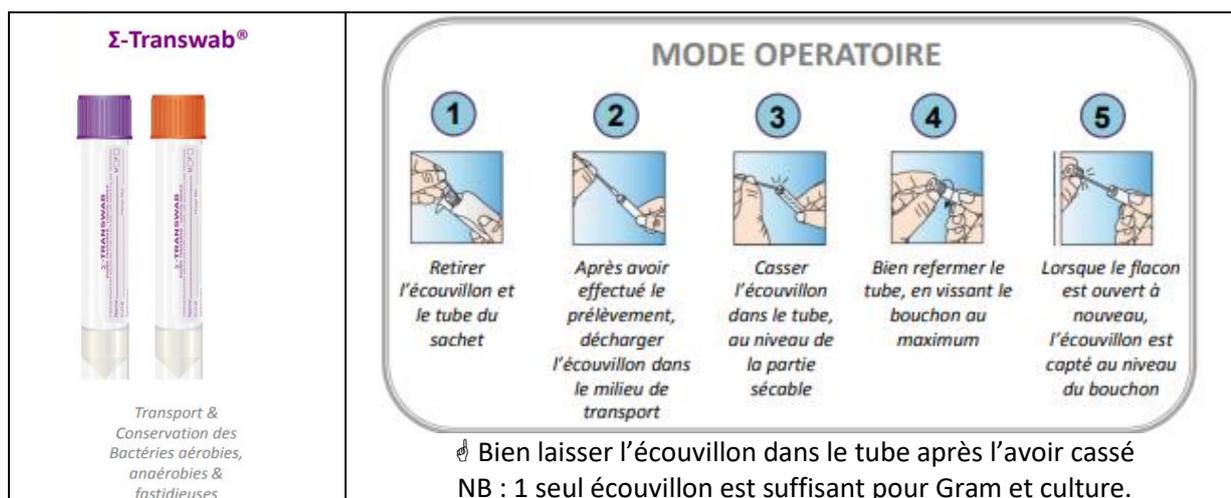

- La recherche de mycoplasme (prescription explicite) ne nécessite pas d'écouvillon supplémentaire.
- La recherche de *Chlamydia Trachomatis* et/ou de *Neisseria Gonorrhoeae* par amplification génique n'est pas réalisée sur prélèvement urétral mais sur **1^{er} jet d'urine** (voir fiche prélèvement urinaire).